

PASSAGEM UTI V4

Tutorial Ilustrado

10 leitos. 10 linhas. Nenhuma pendência invisível.


Instalação, fluxo assistencial, Radar, notificações locais, read-back, temas e Modo Turbo.

CHAVE PROTEGIDA

DADOS SINTÉTICOS

WIDESCREEN 16:9

Ferramenta de apoio à comunicação. Revisão médica obrigatória.

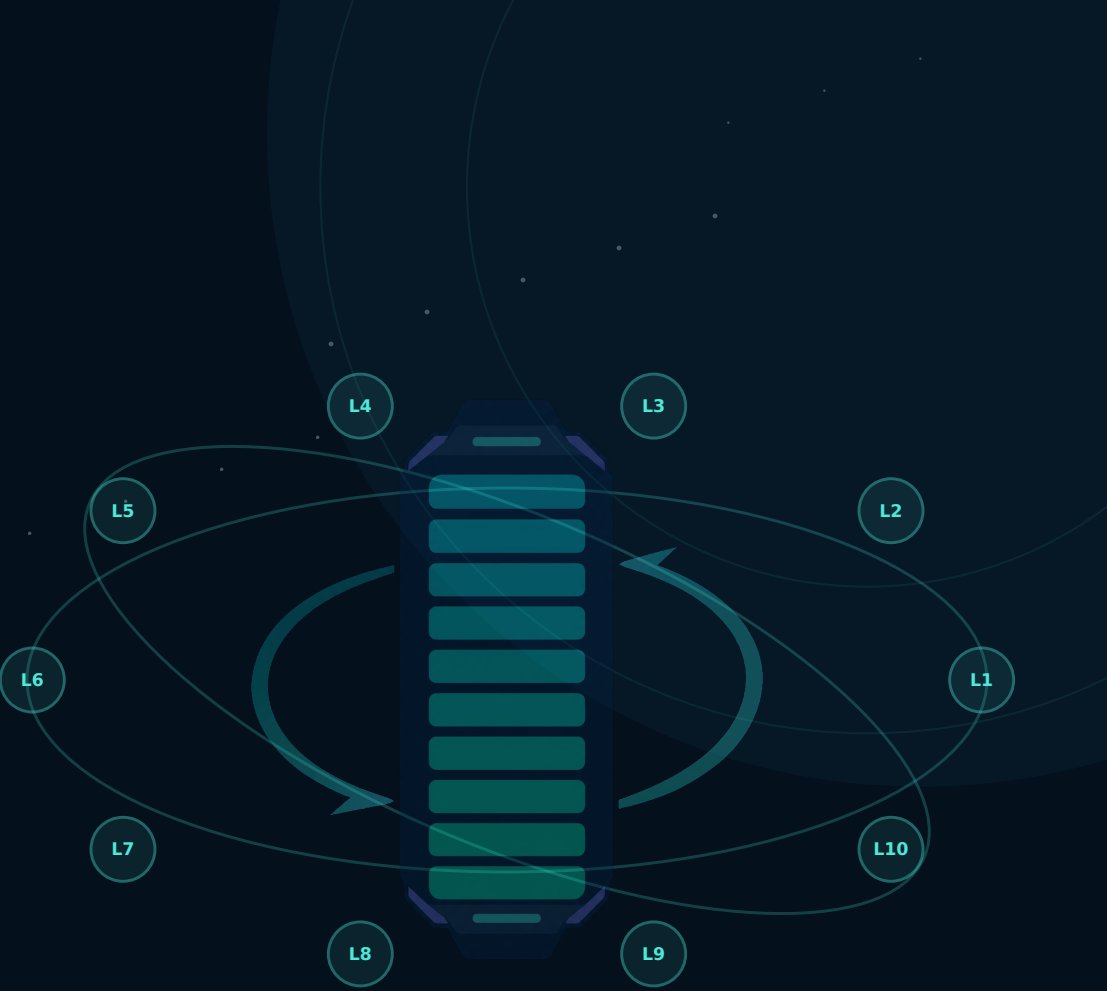

Domine o essencial em quatro missões.

Leia na ordem ou abra somente a etapa necessária durante o plantão.

01

Instalar

Mac, chave já existente e primeiro início.

02

Preparar

Dez leitos, três áreas e material clínico.

03

Operar

Timeline, Radar, notificações e Modo Turbo.

04

Entregar

Read-back, cópia, impressão e exportação.

ATALHO DE 60 SEGUNDOS

1

Terminal aberto

2

GPT localizado

3

Cabeçalho preenchido

4

L1-L10 revisados

Uma configuração inicial. Depois, dois cliques.

A mesma chave já existente é reutilizada sem ser copiada para o aplicativo.

CAMINHO PROTEGIDO NO FINDER

Seu usuário

Documents

API KEY

passagem-plantao-uti

.env

arquivo oculto

~/Documents/API KEY/passagem-plantao-uti/.env

NÃO EXIBIR O SEGREDO

1

Confirmar Node.js

node --version | versão 20 ou superior

2

Entrar na pasta

Digite cd, espaço e arraste a pasta do app

3

Autorizar uma vez

chmod +x start-mac.command


4

Iniciar

./start-mac.command | manual: npm start

Confirme três sinais antes de usar.

O Terminal permanece aberto durante a sessão; parar o servidor não apaga os leitos.

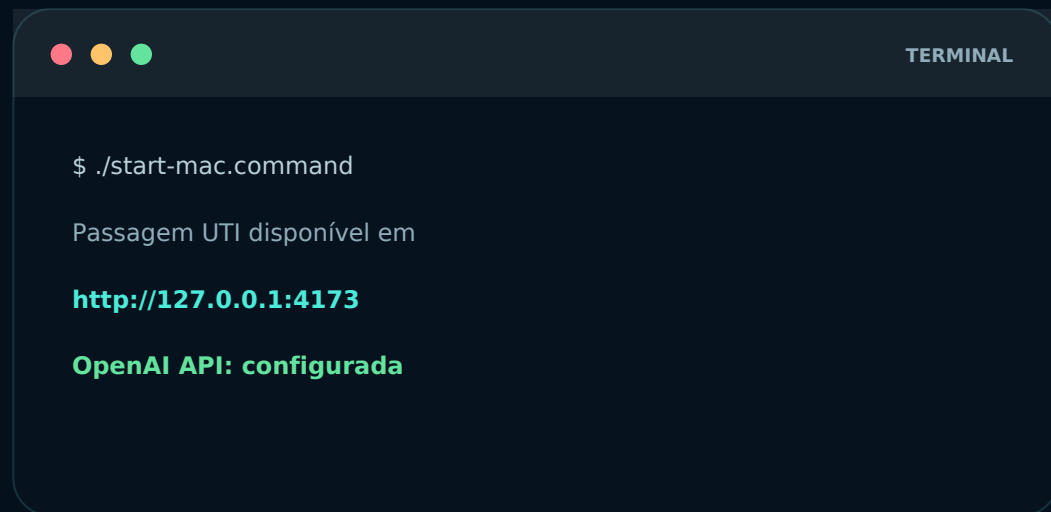

1

Mesmo endereço

Use sempre 127.0.0.1:4173.

2

Terminal aberto

Mantenha a janela durante o uso.


3

Como parar

Pressione Control + C no Terminal.

Cada bateria mostra preparo, não gravidade.

Selecione L1 a L10. O percentual cresce com o preenchimento da passagem.

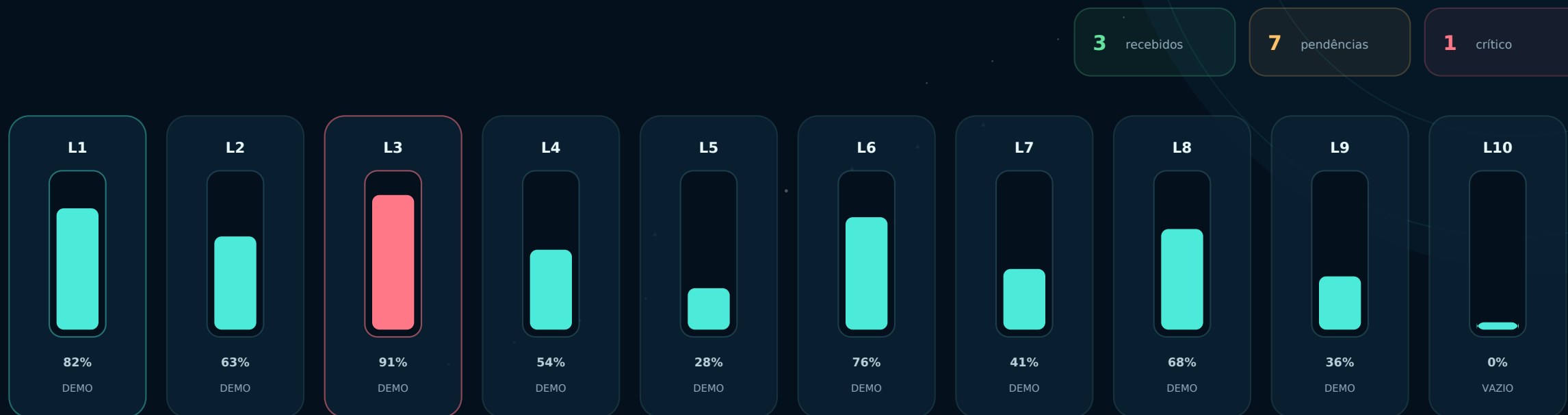

Leitura correta

A bateria indica completude da passagem. O estado clínico é marcado separadamente pelo médico: Estável, Atenção, Crítico ou Não definido.

Capturar. Organizar. Executar.

O fluxo separa conteúdo bruto, documentos e ações do próximo plantão.

01

GPT

Renderizar

Texto bruto, dez tópicos, alertas e linha do tempo.

02

PDF

Exames & arquivos

Cofre local, seleção de anexos e prévias.

03

OK

Checklist

Pendências rastreáveis e read-back do receptor.

UM LEITO | TRÊS ÁREAS | UM ÚNICO FLUXO

Do conteúdo bruto para uma saída revisável.

O GPT organiza os fatos fornecidos e sinaliza dados relevantes ausentes.

ENTRADA BRUTA

Paciente demo, 58 anos.

Admitido por insuficiência respiratória...

Intercorrência documentada às 14h...

Plano: reavaliar após resultado...

RENDERIZAR EM 10 TÓPICOS

GPT

SAÍDA EXECUTÁVEL | 10/10

01 Identificação e contexto

02 Diagnósticos e problemas

03 Últimas 24h

04 Neurológico

05 Respiratório

06-10 Demais tópicos 06-10

1 Ler

2 Conferir números

3 Editar

4 Aceitar pendências

A ordem fixa das 10 linhas.

Quando um dado relevante não existe no material, a saída deve sinalizar NÃO INFORMADO.

01 Identificação e contexto

02 Diagnósticos e problemas ativos

03 Últimas 24h / intercorrências

04 Neurológico, sedação e dor

05 Respiratório e via aérea

06 Hemodinâmica, renal e metabólico

07 Infecção, antimicrobianos e culturas

08 Nutrição, dispositivos e profilaxias

09 Plano e metas do próximo plantão

10 Pendências, gatilhos e riscos

REGRA DE SEGURANÇA

Preserve números, unidades, datas e horários. Não execute a saída sem revisão médica.

Guarde localmente. Envie somente o necessário.

Anexos marcados entram na análise apenas quando o médico clica em Renderizar.

+

Arraste ou clique

PDF | FOTO | TEXTO | DOCX

Até 8 anexos selecionados por análise

RX

radiografia_demo.png

2,1 MB | incluir no GPT

☒

PDF

evolucao_demo.pdf

1,8 MB | somente local

☐

8

anexos

15 MB

por arquivo

22 MB

total

120 mil

caracteres

Pendência rastreável + atualização cronológica.

O checklist mostra o que falta; a timeline registra o que mudou.

OK

CHECKLIST

Pendências e metas

**Reavaliar gasometria**

18h ou piora clínica

ALTA

**Conferir acesso central**

concluído às 15h

MÉDIA

**Revisar resultado documentado**

sugestão aguardando aceite

BAIXA

1 de 2 pendências ativas concluída

T

LINHA DO TEMPO

O que mudou

15:42 | EXAME

Gasometria coletada; resultado pendente.

14:10 | CONDUTA

Conduta documentada pela equipe assistente.

12:35 | CONTATO

Família atualizada; dúvidas esclarecidas.

ENTRA NA PRÓXIMA RENDERIZAÇÃO

Prioridades visíveis. Atalhos diretos ao leito.

Ambos organizam dados registrados; nenhum deles monitora sinais vitais ou detecta deterioração.

RADAR OPERACIONAL

6 com dados

1 crítico

4 alertas

7 pendências

L3

PACIENTE DEMO C

CRÍTICO

2 alertas | 2 pendências altas

L2

PACIENTE DEMO B

ATENÇÃO

1 alerta | 2 lacunas

L1

PACIENTE DEMO A

ESTÁVEL

recebido | sem pendência alta

CENTRAL LOCAL DE NOTIFICAÇÕES

3 NOVAS

TODAS

NÃO LIDAS

render | IA | pendência alta | read-back | Turbo | falhas



L3 | estado crítico

salto ao leito



L2 | lacunas da IA

salto à saída



L1 | read-back confirmado

evento lido



Turbo | 2 leitos concluídos

evento operacional

Marcar lidas

Limpar lidas

Quem recebe confirma o que compreendeu.

O aceite exige dez linhas completas, identificação do receptor e três conferências.



EMISSOR

passagem revisada

10 LINHAS + RISCOS + PENDÊNCIAS

MÉDICO RECEPTOR

Nome

MÉDICO RECEPTOR DEMO

CRM / UF

CRM-UF 00000

- ☒ Revisei as 10 linhas
- ☒ Conferi alertas e lacunas
- ☒ Compreendi pendências e gatilhos

CONFIRMAR RECEBIMENTO

PROTEÇÃO AUTOMÁTICA

Qualquer alteração assistencial posterior invalida o aceite e exige nova conferência.

Comando rápido para um leito. Turbo para vários.

Os dois recursos usam o mesmo servidor local e a mesma chave protegida.

K

COMMAND / CONTROL + K

Ações rápidas

RAD

Abrir Radar

GPT

Renderizar L3

!

Criar pendência alta

L8

Ir para L8

Setas navegam | Enter executa | Esc fecha

3x

MODO TURBO

Até 3 análises simultâneas

7 de 10 processados | último: L7

- Confirma antes de iniciar
- Ignora entradas sem alteração
- Permite cancelar
- Cada leito novo pode gerar custo da API

Sistema, Claro ou Escuro. Copiar, imprimir ou exportar.

A preferência visual fica local; cada saída tem uma finalidade diferente.

SISTEMA

acompanha o macOS




CLARO

ambiente iluminado



ESCURO

plantão noturno

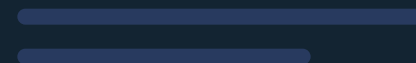

COPY

Copiar leído

10 linhas + eventos + pendências

ALL

Copiar plantão

cabeçalho + leitos com dados

PDF

Imprimir

volte à aba Renderizar

JSON

Exportar

sem conteúdo dos anexos

ATENÇÃO: exportar não é restaurar; a interface atual não importa o JSON.

Local primeiro. Envio deliberado. Revisão humana.

A arquitetura reduz exposição accidental, mas não substitui política institucional ou base legal.



01

A chave não aparece no navegador, JSON, tutorial ou GitHub.

02

Use o mesmo perfil e 127.0.0.1:4173 para manter o armazenamento.

03

Revise toda saída antes de transmitir ou executar uma conduta.

04

Proteja exportações e confirme política institucional e LGPD.

Problema -> causa -> próxima ação.

Execute somente o resgate relacionado ao sintoma visível.

SINAL	RESGATE
Node.js não encontrado	node --version; instale Node 20+ e reabra o Terminal.
Permissão negada	chmod +x start-mac.command dentro da pasta do app.
Chave não encontrada	Confira o caminho, .env e se o arquivo não virou .env.txt.
Servidor indisponível	Mantenha o Terminal aberto e execute npm start.
Chave recusada ou sem cota	Confira chave e faturamento do projeto da OpenAI API.
Resposta descartada	O leito mudou durante a análise; revise e renderize novamente.
Anexos ausentes	Use o mesmo navegador, perfil e 127.0.0.1:4173.
Nada mudou	O app evita gasto repetido; force somente se necessário.



CHECKLIST DE DECOLAGEM

Pronto para o próximo plantão.

● Servidor local

● GPT localizado

● Cabeçalho

● Leitos revisados

● Pendências aceitas

● Read-back

Ferramenta de apoio. Não substitui prontuário, prescrição, avaliação à beira-leito ou julgamento médico.